

● VAKUUM-ANRÜHRGERÄTE WAMIX-COMFORT IV, WAMIX-CLASSIC IV UND WAMIX-INJECTOR IV

Die Mischung macht's!



Wamix-Comfort IV
mit Zubehör
Tischstativ

Wamix-Classic IV
mit Zubehör
Tischstativ

Wamix-Injector IV
mit Zubehör
Tischstativ

Technische Informationen

Kraftvoll, kompakt und innovativ. Die Wamix-Geräte überzeugen durch perfekte und blasenfreie Anmischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikonem.

Beim Wamix-Injector überzeugt der leistungsstarke, ölfreie Vakuumerzeuger mit seinem hohen Wirkungsgrad, beim Wamix-Comfort und Wamix-Classic die bewährte und wartungsfreie Motorpumpe. Der Anrührvorgang startet bei allen Geräten mit nur einem Tastendruck, die Mischzeit ist bis 240 Sekunden bzw. beim Wamix-Classic und Injector bis 999 Sekunden einstellbar. Beim Wamix-Comfort / -Classic kann die Rührwerkzahl von 200 min^{-1} - 600 min^{-1} eingestellt werden. Das Wamix-Comfort verfügt zusätzlich über 15 Programmspeicherplätze mit weiteren Einstellmöglichkeiten wie z.B. Vor- und Nachvakuum.

- kompakte Vakuum-Anrührgeräte mit kraftvollem, wartungsarmem Rührmotor
- perfekte Anmischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikonem
- Starten des Anrührvorganges mit nur einem Tastendruck; automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers
- akustisches Signal bei Programmende, Blinken der Timer-Anzeige (Classic/Injector)
- Mischzeit bis 240 Sekunden bzw. 999 Sekunden einstellbar
- Belüftung des Bechers erst nach Betätigung des Ein-/Ausschalters
- getrennter Antrieb von Motor und Pumpe bzw. Vakuumerzeuger


Technische Daten und Zubehör

Wamix-Comfort IV	Artikel Nr.: 171977
Wamix-Classic IV	Artikel Nr.: 171979*
Wamix-Injector IV	Artikel Nr.: 171978**
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	2,9 A (Si 4,0 A), 2,4 A (Si 4,0 A)*, 1,8 A (Si 4,0 A)**
Leistung	315 W, 220 W*, 120 W**
Maße B x H x T	205 x 370 x 245 mm
Gewicht	9,9 kg, 9,5 kg*, 8,3 kg**
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Drehzahl	200 - 600 min ⁻¹ , 200 - 600 min ⁻¹ *, 380 min ⁻¹ **
Vakuum	ca. 900 mbar, ca. 900 mbar*, ca. 950 mbar**
Mischzeit	bis 240 Sek., 999*/** Sek. einstellbar
Schutzklasse	IP 22
Druckluftanschluss	min. 5 bar**

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Becher mittel kpl. 350 ml	171283
Befestigungsset	174358
PVC-Schlauch Ø 8 x 6 Gewebe (blau) 2 m**	320026
Zubehör	Artikel Nr.:
Tischstativ (B 219 x H 467 x T 308 mm)	171777
Becher extra klein kpl. 75 ml	171295
Becher klein kpl. 200 ml	171230
Becher mittel kpl. 350 ml	171283
Becher groß kpl. 600 ml	171237
Becher extra groß kpl. 1000 ml	171269
PVC-Schlauch Ø 8 x 6 Gewebe (blau) per lfd. Meter**	320026
Vakuum-Wässerungsbecher 600 ml	171275

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten

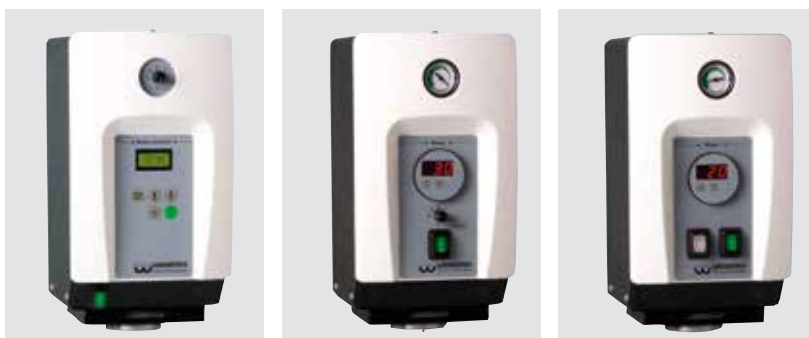

Wamix-Comfort IV mit Wandhalter

Wamix-Classic IV und Wamix-Injector IV mit Wandhalter



1. 1000 ml, 2. 600 + 350 ml, 3. 75 ml + 200 ml

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- Grundausstattung Wamix-Serie: Kontrollfenster/Überfüllungshinweis für Geräteschutz
- blasenfreies Anmischen von Gipsen, Einbettmassen und Silikonen
- bedienerfreundliche Anwendung, Starten des Anrührvorganges mit nur einem Tastendruck
- Wamix-Comfort/Classic mit Rührwerk-drehzahleinstellung von 200 min⁻¹ - 600 min⁻¹
- einfache Reinigung durch pflegeleichte Oberflächen
- Mischbecher 350 ml und Wandhalter im Lieferumfang enthalten, Tischstativ sowie weitere Bechergrößen als Zubehör erhältlich

www.wassermann-dental.com